


## FM INFILTRATION SYSTEM COLEMAN TYPE

FMコールマン型インフィルトレーションカニューーラ

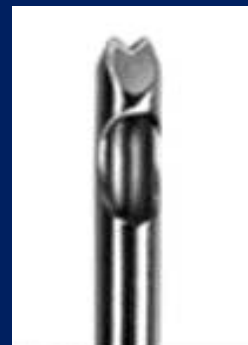

# FM CANNULA

FMコールマン型インフィльтраーションシステムは、脂肪注入術を行われるすべてのドクターにとって欠かす事のできない新世代のシステムです。

正確な脂肪吸引とダメージの少ない脂肪の精密な注入が容易となり、より自然で永続的な審美維持が実現されます。



## FM Infiltration Cannula Coleman Type / FMコールマン型インフィльтраーションカニューーラ



FMコールマン型インフィльтраーションカニューーラは、注入部位や状態に合うよう3種類のスタイルがあります。

- I. 先端が鈍になったタイプです。
- II. I に比べて穴を先端及び両サイドへ広げてあります。
- III. 注入口が平らになっており瞼下部や口唇部に有用です。

- |           |                                     |
|-----------|-------------------------------------|
| FM-COL1-7 | FMコールマン型インフィльтраーションカニューーラ I 7cm   |
| FM-COL3-7 | FMコールマン型インフィльтраーションカニューーラ III 7cm |
| FM-COL1-9 | FMコールマン型インフィльтраーションカニューーラ I 9cm   |
| FM-COL3-9 | FMコールマン型インフィльтраーションカニューーラ III 9cm |

# FM CANNULA

## FM Coleman CC・CV Type/FMコールマンCC・CV型インフィルトレーションカニューラ



FMコールマンCC型

FMコールマンCC型・CV型は顔面中心ラインへの注入用解剖学の見地から設計開発され、複雑に入り組んだ部位への注入をサポートします。

CC型（凹部）用カニューラは、下向きのカーブで注入口も下向きになっており、深部軟組織への注入に適しています。この湾曲は顎部のような複雑な輪郭に有用です。



FMコールマンCV型

CV型（凹部）用カニューラは、下向きのカーブで注入口は上向きになっており、より表皮に近い組織への注入に適しています。

FM-COL2-9CC

FMコールマンCC型インフィルトレーションカニューラⅡ 9cm

FM-COL2-9CV

FMコールマンCV型インフィルトレーションカニューラⅡ 9cm

## FM Coleman Bevel Type/FMコールマン型ベブルタイプ



FMコールマン型ベブルタイプは、先端がV型にカットされており癒着組織を剥離しながら適切な部位への注入ができます。

ニキビ跡や繊維状組織等に特に有効です。

FMコールマン型ベブルタイプは左図のように先端がV型に浅くカットされています。



ベブルタイプ

FM-COL-V149

FMコールマン型ベブルタイプ（ショート）14GX9cm

FM-COL-V14B

FMコールマン型ベブルタイプ（ロング）14GX15cm

## FM Coleman Aspiration Cannula/FMコールマン型アスピレーションカニューラ



FMコールマン型アスピレーションカニューラは、より永続的で審美性に富んだ注入実現のため、吸引時の脂肪のダメージが最小限に抑えられるよう先端をデザインしてあります。

FM-COL-ASP1

コールマン型アスピレーションカニューラⅠ 12GX15cm

FM-COL-ASPB

コールマン型アスピレーションカニューラⅠ 12GX23cm

# FM CANNULA

## FM Coleman Infiltration Cannula MINI/

### FMコールマン型インフィльтраーションカニューラミニ



FMコールマン型インフィльтраーションカニューラミニは、19Gと他のカニューラに比べても細いため、主に顔の注入などの施術に使用します。掃除用の棒が付いています。

FM-COL-MINI1 FMコールマン型インフィльтраーションカニューラミニ I

## FM Coleman B Type・BC Type/FMコールマンB型・BC型



FMコールマンB型（BODYタイプ）・BC型（BODY カーブタイプ）インフィльтраーションカニューラは、主に体の注入などの施術に使用します。

※FM-COL1-16BC

FM-COL1-14B	FMコールマンB型インフィльтраーションカニューラ I	14Gx15cm
FM-COL1-16B	FMコールマンB型インフィльтраーションカニューラ I	16Gx15cm
FM-COL1-16BC	FMコールマンB型インフィльтраーションカニューラ I	16Gx15cm

## FM遠心分離器



医療機器届出番号：13B3X00403260002

タイマー型の自動遠心分離器です。ダイヤルでタイマーをセットし、ボタンでSTART/STOPを操作します。内部シリンダーは取り外し可能で、オートクレーブ（高圧蒸気滅菌）が可能です。

FMO-37 FM 遠心分離器

電源/AC100 3A

タイマー/0~12分

最大遠心力/820G

最大回転数/1980±50

外寸/W400xL445xH300mm

重量/25kg

電源コード/170cm



50mlシリンジ用シリンダー 4本  
アルミ製（オートクレーブ可能）

総販売元

有限会社フォーメディクス

〒162-0842 東京都新宿区市谷砂土原町3-4-1 4F

TEL：03-6280-7233 FAX：03-6280-7667